

# Betriebsanleitung Mikroskopkamera


**KERN**

**ODC-82, ODC-83**

ODC 822, ODC 824, ODC 825  
ODC 831, ODC 832

Version 1.0  
01/2016



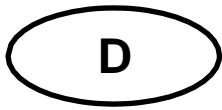

# KERN ODC-82, ODC 83

Version 1.0 01/2016

## Betriebsanleitung Mikroskopkamera

### Hinweise vor Gebrauch

Man sollte es vermeiden das Gerät direktem Sonnenlicht, hohen oder zu niedrigen Temperaturen, Erschütterungen, Staub und hoher Luftfeuchtigkeit auszusetzen. Der geeignete Temperaturbereich beträgt 0 - 40° C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 85 % sollte nicht überschritten werden.

Es muss stets sichergestellt sein, dass ein geprüftes Stromkabel verwendet wird, um so mögliche Schäden durch die Entstehung von Überhitzung (Feuerentwicklung) oder eines elektrischen Schocks zu verhindern.

Das Gehäuse darf nicht geöffnet und interne Komponenten berührt werden. Es besteht die Gefahr diese zu beschädigen und die Funktionsfähigkeit der Kamera zu beeinträchtigen.

Für die Durchführung einer Reinigung der Kamera muss das Stromkabel immer entfernt sein.

Der Sensor sollte stets frei von Staub gehalten und nicht berührt werden. Anderenfalls können erhebliche Beeinträchtigungen des mikroskopischen Bildes auftreten. Bei Nichtgebrauch der Kamera daher immer die Schutzabdeckungen anbringen.

### Technische Daten

Modell KERN	Auflösung	Schnitt- stelle	Sensor	Framerate	Farbe / Monochrom	Unterstützte Betriebssysteme
ODC 822	1,3 MP	USB 2.0	1/3" CMOS	15 - 48 fps	Farbe	Win, XP, Vista, 7, 8, 10
ODC 824	3,1 MP	USB 2.0	1/2" CMOS	11,5 - 45 fps	Farbe	Win, XP, Vista, 7, 8, 10
ODC 825	5,1 MP	USB 2.0	1/2,5" CMOS	6,8 -55 fps	Farbe	Win, XP, Vista, 7, 8, 10
ODC 831	3,1 MP	USB 3.0	1/3" CMOS	27,3 – 53,3 fps	Farbe	Win, XP, Vista, 7, 8, 10
ODC 832	5,1 MP	USB 3.0	1/2,5" CMOS	14,2 – 101,2	Farbe	Win, XP, Vista, 7, 8, 10

## Lieferumfang

- Mikroskopkamera
- USB-Kabel
- Objektmikrometer zum Kalibrieren
- Software-CD
- Okularadapter ( $\varnothing$  23,2 mm)
- Anpassungsringe ( $\varnothing$  30,0 mm +  $\varnothing$  30,5 mm) für Okularadapter

## Montage

1. Schwarzen Deckel an der Unterseite der Kamera abschrauben.
2. Das Gewinde, an dem sich der Deckel befand, ist ein genormtes C-Mount-Gewinde. Somit sind für den Anschluss an ein Mikroskop spezielle C-Mount Adapter notwendig.
3. Zur Montage am Mikroskop wird der C-Mount Adapter an der Kameraanschlussstelle des Mikroskops angebracht, danach muss die Kamera an den C-Mount Adapter angeschraubt werden.

### Wichtig:

**Die Wahl des richtigen C-Mount Adapters hängt vom verwendeten Mikroskop-Modell ab. Es muss ein Adapter sein, der an die Bauform des Mikroskops angepasst ist und vom Hersteller für das entsprechende Gerät empfohlen wird.**

4. Gegebenenfalls das Mikroskop für trinokularen Gebrauch einstellen (über Trinokular-Umschaltrad / Trinokular-Umschaltstab).

## PC-Anschluss

1. USB-Verbindung über USB Kabel herstellen.
2. Software über Software-CD auf PC installieren.  
*Eine detaillierte Anleitung befindet sich in der mitgelieferten "readme"-Datei.*
3. Sowohl die mitgelieferten "Help"-Dateien als auch der softwareinterne "User Guide" enthalten alle Informationen und Anweisungen zum Betrieb der Software, bzw. zur digitalen Mikroskopie.